


De manera que las secciones planas, también conocidas como "placas", estén opuestas y el lado de los "dientes" quede hacia arriba.



5. Para completar la segunda fijación de la vanila en la férula superior, forme una "L" hacia atrás con el dispositivo y, con un ligero giro de la férula superior, inserte el extremo de la vanila en el recorte del punto de giro del anclaje.

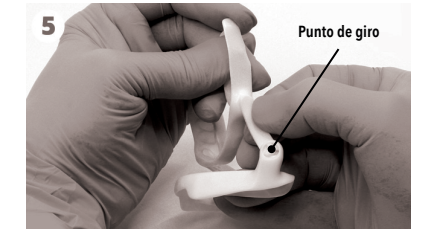

Una vez que **ambas** varillas estén colocadas, las placas (lados planos) de las férulas deben quedar enfrentadas, y el D-SAD está listo para usarse.

El avance del D-SAD Classic para un tratamiento óptimo

Durante la etapa de avance, el dentista pueden cambiar las varillas para obtener la posición óptima para el tratamiento con el D-SAD Classic. El odontólogo le informará si esto es necesario. Para aumentar la protrusión, utilice varillas más cortas (por ejemplo, pase de 26 a 25,5 mm). Para reducir la protrusión, utilice varillas más largas (por ejemplo, pase de 25,5 a 26 mm). Una vez que se haya alcanzado el ajuste final, las varillas se fijan en su lugar y no es necesario cambiarlas. Los anclajes y las varillas se convierten en la bisagra mecánica fija permanente del aparato. Utilice siempre la misma longitud de varillas en ambos lados, a menos que su odontólogo especifique lo contrario.

Retirar las varillas durante la etapa de avance

Vuelva a formar una "L" hacia atrás con el dispositivo, como se ha indicado anteriormente (figura 5). Una vez que esté en esta posición, gire la varilla para soltarla del anclaje de la férula superior. A continuación, retire el otro lado.

Otros consejos

- Beba solo agua mientras us el dispositivo.
- Viajes en avión: se recomienda llevar el dispositivo en el equipaje de mano.
- Manténgalo alejado de las mascotas, ya que pueden confundirlo con un "juguetito para morder".

Contenido del material

Tanto el D-SAD Classic como el D-SAD X3 están fabricados al 100 % con poliamida tipo 12, un material de grado médico de la familia del nailon. La alergia y la intolerancia a este material biocompatible son extremadamente raras. Si tiene dudas, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su odontólogo o médico.

Garantía

Los dispositivos Panthera Sleep tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de fabricación. La garantía cubre los dispositivos contra cualquier defecto de mano de obra o de materiales. Esta es una garantía del fabricante y Panthera Dental o sus socios o distribuidores autorizados son los únicos que pueden realizar cualquier tipo de reparación. Esta garantía no incluye ningún costo relacionado con visitas dentales o médicas adicionales.

Nota: Para cumplir con esta garantía, el dispositivo **y** las varillas **y** los clips deben ser devueltos por su odontólogo a Panthera Dental. El reemplazo o la reparación del dispositivo es a criterio de Panthera Dental.



Nota: El diseño del dispositivo puede variar en función de las especificaciones solicitadas por su odontólogo.

Instalación de los clips

1. Para insertar el clip, empuje el extremo abierto del clip en la abertura de la cubierta del clip.
2. Para quitar el clip, sujete la parte superior e inferior del clip y tire de la abertura de la cubierta del clip.



Durante la etapa de avance, el dentista pueden cambiar los clips para obtener la posición óptima para el tratamiento con el D-SAD X3. El odontólogo le informará si esto es necesario. Para aumentar la protrusión, utilice clips más largos (por ejemplo, pase de 0 a 0,5 mm). Para reducir la protrusión, utilice clips más cortos (por ejemplo, pase de 1 a 0,5 mm). Una vez que se haya alcanzado el ajuste final, los clips se fijan en su lugar y no es necesario cambiarlos. Utilice siempre la misma longitud de clips en ambos lados, a menos que su odontólogo especifique lo contrario.



Para ver más imágenes, visite www.pantheradental.com/downloads.

La siguiente sección se aplica a ambos dispositivos

Preparare para dormir

- Cepille los dientes, use el hilo dental y humedezca el dispositivo con agua tibia.
- Cuando coloque el dispositivo en su boca, coloque primero la FÉRULA SUPERIOR en los dientes superiores presionando en ambos lados con los pulgares.
- Mueva la mandíbula hacia adelante, presione la férula inferior en su lugar sobre los dientes inferiores. Presione en ambos lados con los dedos.
- Cierre lentamente la boca. En esta posición, la mandíbula se encuentra en una posición adelantada.

Cómo quitar el D-SAD Classic o X3

1. **Retire la férula inferior:** coloque los pulgares en ambos lados de la férula inferior, cerca de la enca por encima y tire hacia abajo de ambos lados de la férula al mismo tiempo.

2. **Retire la férula superior:** coloque los dedos en ambos lados de la férula superior, cerca de la enca y tire hacia abajo de ambos lados de la férula al mismo tiempo.

3. Retire el dispositivo de la boca y límpielo según las instrucciones de limpieza.

Instrucciones de limpieza y almacenamiento

Todas las mañanas, después de cada uso, enjuague el dispositivo con agua tibia. Límpielo con un cepillo de dientes de cerdas suaves o un cepillo para dentaduras postizas. Cepille todas las superficies y los lados.

• Inspeccione el dispositivo para ver si está limpio o dañado.

• Sequie bien el dispositivo con una toalla de papel o paño limpio.

• Limpie el dispositivo al menos dos veces por semana con una solución limpiadora antibacteriana sin cloro para prótesis dentales. Siga las instrucciones del fabricante. Sumerja y cepille el dispositivo con la solución. Enjuague y seque bien con una toalla de papel o paño limpio.

• Antes de guardarlo, asegúrese de que el estuche esté limpio y seco.

• Guárdelo en el estuche sin la tapa, a temperatura ambiente y alejado del calor directo, la humedad y la luz. Nunca guarde el dispositivo en un estuche cerrado cuando haya humedad.

Advertencias

- No coloque el dispositivo en agua hirviendo (100 °C o 212 °F).
- Compruebe que no tenga alergia a los ingredientes presentes en la solución limpiadora antibacteriana sin cloro para prótesis dentales antes de utilizarla.
- No utilice enjuague bucal para limpiar el dispositivo, ya que podría mancharlo y producir olores o sabores.
- No utilice productos a base de cloro, lejía, ácido acético, productos de limpieza para el hogar o soluciones a base de alcohol.

Nota: La decoloración del dispositivo puede ser algo normal; esto se debe a la acidez de la saliva. Algunos medicamentos, los empaques de amalgama, el café, el té, los refrescos de cola y el vino pueden afectar al color del dispositivo. Esto no afectará el rendimiento ni a la garantía del dispositivo.

Ejercicios matutinos útiles

Si experimenta alguna molestia en los dientes por la mañana, puede hacer lo siguiente:

- Su dentista puede proporcionarle instrucciones para realizar ejercicios matutinos que le ayuden a realinear la mordida después de usar el dispositivo, como mover la barbilla hacia atrás, apretar los molares entre sí y mantenerlos durante 2 a 3 segundos (repetir de 5 a 10 veces).
- Desayune o mastique un chicle sin azúcar. Esto ayudará a que su mordida vuelva a la normalidad.

Otros consejos

- Beba solo agua mientras us el dispositivo.
- Viajes en avión: se recomienda llevar el dispositivo en el equipaje de mano.
- Manténgalo alejado de las mascotas, ya que pueden confundirlo con un "juguetito para morder".


Contenido del material

Tanto el D-SAD Classic como el D-SAD X3 están fabricados al 100 % con poliamida tipo 12, un material de grado médico de la familia del nailon. La alergia y la intolerancia a este material biocompatible son extremadamente raras. Si tiene dudas, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su odontólogo o médico.

Garantía

Los dispositivos Panthera Sleep tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de fabricación. La garantía cubre los dispositivos contra cualquier defecto de mano de obra o de materiales. Esta es una garantía del fabricante y Panthera Dental o sus socios o distribuidores autorizados son los únicos que pueden realizar cualquier tipo de reparación. Esta garantía no incluye ningún costo relacionado con visitas dentales o médicas adicionales.


Nota: Para cumplir con esta garantía, el dispositivo **y** las varillas **y** los clips deben ser devueltos por su odontólogo a Panthera Dental. El reemplazo o la reparación del dispositivo es a criterio de Panthera Dental.

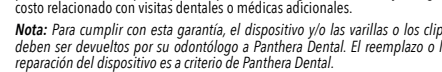

Nota: El diseño del dispositivo puede variar en función de las especificaciones solicitadas por su odontólogo.

Instalación de los clips

1. Para insertar el clip, empuje el extremo abierto del clip en la abertura de la cubierta del clip.
2. Para quitar el clip, sujete la parte superior e inferior del clip y tire de la abertura de la cubierta del clip.

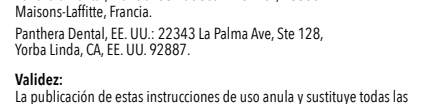

Durante la etapa de avance, el dentista pueden cambiar los clips para obtener la posición óptima para el tratamiento con el D-SAD X3. El odontólogo le informará si esto es necesario. Para aumentar la protrusión, utilice clips más largos (por ejemplo, pase de 0 a 0,5 mm). Para reducir la protrusión, utilice clips más cortos (por ejemplo, pase de 1 a 0,5 mm). Una vez que se haya alcanzado el ajuste final, los clips se fijan en su lugar y no es necesario cambiarlos. Utilice siempre la misma longitud de clips en ambos lados, a menos que su odontólogo especifique lo contrario.



Para ver más imágenes, visite www.pantheradental.com/downloads.

La siguiente sección se aplica a ambos dispositivos

Preparare para dormir

- Cepille los dientes, use el hilo dental y humedezca el dispositivo con agua tibia.
- Cuando coloque el dispositivo en su boca, coloque primero la FÉRULA SUPERIOR en los dientes superiores presionando en ambos lados con los pulgares.
- Mueva la mandíbula hacia adelante, presione la férula inferior en su lugar sobre los dientes inferiores. Presione en ambos lados con los dedos.
- Cierre lentamente la boca. En esta posición, la mandíbula se encuentra en una posición adelantada.

Indicazioni per l'uso

I dispositivi Panthera D-SAD mirano a ridurre o alleviare il russamento e l'apnea ostruttiva del sonno (OSA) bi volwassensen te verminderen of te verlichten.

2. **Rimuovere il bite superiore:** posizionare le dita su entrambi i lati del bite superiore, vicino alla gengiva, e tirare verso il basso entrambi i lati del bite allo stesso tempo.

3. **Rimuovere il dispositivo dalla bocca e pulirlo** secondo le istruzioni per la pulizia.

Importante da ricordare

Indossare sempre il bite superiore e quello inferiore insieme. Prima di ogni utilizzo, controllare il dispositivo per verificare:

• «Possibili danni: il dispositivo non deve essere utilizzato in caso di usura o danni visibili.

• Pulizia: se il dispositivo non è pulito, deve esserlo secondo le istruzioni per la pulizia.

Controindicazioni

I dispositivi Panthera possono controindicati per i pazienti che:

• «Hanno meno di 18 anni.

• «Hanno denti non saldi.

• «Presentano una patologia parodontale in stato avanzato.

• «Soffrono di disturbi respiratori gravi diversi dall'OSA.

• «Soffrono di apnea centrale del sonno.

Precauzioni

• «Lo specialista in odontoiatria del sonno deve esaminare la storia medica dei pazienti, compresa anamnesi di asma, disturbi respiratori o altri problemi salute rilevanti, e indirizzare il paziente al medico appropriato prima di prescrivere il dispositivo.

• «I dispositivi Panthera devono essere utilizzati durante il sonno notturno o quando si fa un pisolino.

• «Non mangiare mentre si indossa il dispositivo. È possibile bere acqua.

• «Si raccomanda di consultare uno specialista del settore dentale per un controllo annuale.

Possibili effetti collaterali

L'uso dei dispositivi Panthera può causare:

• «Spostamento dei denti o cambiamenti nell'occlusione dentale.

• «Indolenzimento gengivale o dentale.

• «Dolore o indolenzimento dell'articolazione temporo-mandibolare.

• «Ostruzione della respirazione orale.

• «Eccessiva salivazione o secchezza della bocca.

• «Qualsiasi incidente anomalo legato all'uso del dispositivo deve essere segnalato a Panthera Dental e, per i pazienti dell'UE, anche all'autorità competente del paese di residenza.

• «In caso di effetti collaterali significativi, contattare il proprio dentista.

Contenuto della confezione

• D-SAD Classic con kit di aste D O-SAD X3 con kit di clip.

• Bagnio di pulizia.

• Custodia.

• Istruzioni per l'uso.


• Opzionale: fasce elastiche odontotiche.

• Opzionale: modello dentale del paziente.

D-SAD Classic

Componenti

1. Bite superiore e bite inferiore con punto di rotazione fisso (ancoraggio).
2. Un kit di aste per la protrusione della mandibola. Le aste sono disponibili in diverse lunghezze: il dentista determina la lunghezza più adatta per il paziente.

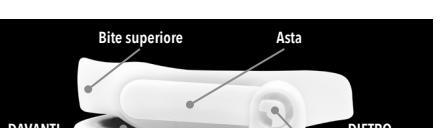

Nota: Il design del dispositivo può variare a seconda delle specifiche richieste dal dentista.

Informazioni sull'assistenza agli utenti

Il numero di telefono del vostro dentista: _____

Per ulteriori informazioni, visitate www.panthersleep.com

Panthera Dental, Canada: 9105 rue John Simons, Québec, Canada, G2B 0S6

Panthera Dental, Francia: 38 Rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, Francia.

Panthera Dental, EE. UU.: 22343 La Palma Ave, Ste 128, Yorba Linda, CA, EE. UU. 92887.



Validità:

La pubblicazione di estas istruzioni de uso annula y sustituye todas las versiones anteriores. La autorización y disponibilidad de los productos puede estar limitada a determinados países/regiones. © Panthera Dental, 2022. Reservados todos los derechos.

Attacco dell'asta

Le aste collegano il bite superiore e quello inferiore (cerniera) e permettono di spostare la mandibola in avanti.

1. Attaccare un'asta su ogni lato del bite inferiore nell'incavo dell'ancoraggio, il punto di ancoraggio fisso andrà a unirsi all'incavo sull'asta.

2. Premere saldamente per bloccare. Il numero dell'asta deve essere rivolto verso l'interno e l'estremità non attaccata deve essere diretta verso la parte posteriore del bite.

Fissare prima il bite superiore e quello inferiore su un lato.




Prepararsi al sonno

- «Lavarsi i denti e passare il filo interdentale, quindi inumidire il dispositivo con acqua tiepida.
- «Quando si posiziona il dispositivo in bocca, mettere PRIMA il BITE SUPERIORE su tutti i denti superiori premendo su entrambi i lati con i polli.
- «Spostare la mandibola in avanti, premere il bite inferiore nella sua posizione sui denti inferiori. Premere su entrambi i lati con la dita.
- «Chiudere lentamente la bocca. In questa configurazione, la mandibola è in posizione avanzata.




3. Per fissare il bite superiore, posizionarlo con il lato "dent" in vista (rivolto verso l'alto), fissare un lato del bite superiore al bite inferiore con l'asta inserita nell'incavo.

2. Dopo aver fissato l'asta su un lato, portare il bite superiore verso il bite inferiore in modo che le sezioni platea, dette anche "plateau", siano opposte l'una all'altra e il lato "dent" sia rivolto verso l'alto.

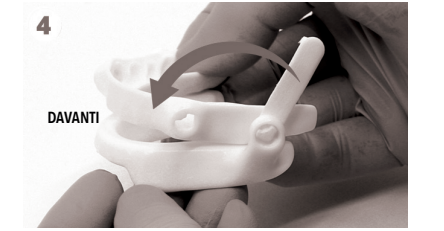

5. Per completare il secondo attacco dell'asta sul bite superiore, formare una "L" capovolta con il dispositivo e, con una leggera torsione del bite superiore, inserire l'estremità dell'asta nell'incavo sul punto di rotazione dell'ancoraggio.

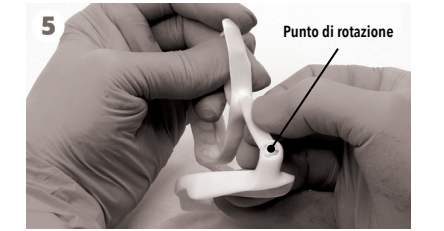

Una volta che **entrambe** le aste sono in posizione, i plateau (lati piatti) dei bite devono trovarsi uno di fronte all'altro e il D-SAD è pronto all'uso.

Spingere in avanti D-SAD Classic per un trattamento ottimale

Durante la fase di protrusione, le aste possono essere cambiate dal dentista per ottenere la posizione terapeutica ottimale di D-SAD Classic. Il dentista vi informerà se questo passaggio è necessario. Per aumentare la protrusione, utilizzare aste più corte (ad es. passare da 26 a 25,5 mm). Per diminuire la protrusione, utilizzare aste più lunghe (ad es. passare da 25,5 a 26 mm). Una volta raggiunta l'impostazione finale, le aste vengono fissate in posizione e non devono essere cambiate. Gli ancoraggi e le aste diventano il cardine meccanico fisso permanente del dispositivo. Utilizzare sempre la stessa lunghezza di aste su entrambi i lati, salvo indicazione diversa da parte del dentista.

Rimozione delle aste durante la fase di protrusione

Ricreare una "L" rovesciata con il dispositivo come indicato sopra (Figura 5). Una volta in questa posizione, girare l'asta per liberarla dall'ancoraggio superiore del bite, quindi rimuovere l'altro lato.

Altri suggerimenti

- Bere solo acqua mentre il dispositivo è in posizione.
- Viaggi aerei: si consiglia di mettere il dispositivo nel bagaglio a mano.
- «Tenere lontano dagli animali domestici perché potrebbero pensare che sia un "giocattolo da masticare".

Composizione del materiale

Sia D-SAD Classic che D-SAD X3 sono realizzati al 100% in poliammide di tipo 12, un materiale per uso medico della famiglia del nylon. Le allergie e le intolleranze a questo materiale biocompatibile sono estremamente rare. In caso di dubbi, smettere di usare il dispositivo e consultare il proprio dentista o medico.

Garanzia

I dispositivi Panthera Sleep sono garantiti per 3 anni dalla data di produzione. La garanzia copre i dispositivi contro qualsiasi difetto di fabbricazione o dei materiali. Questa è una garanzia del produttore e qualsiasi riparazione deve essere fatta solo da Panthera Dental o dai suoi partner/distributori autorizzati. La garanzia non include eventuali costi associati a visite dentistiche o mediche aggiuntive.

Nota: Perché questa garanzia sia valida, il dispositivo e/o le aste e le clip devono essere restituite dal dentista a Panthera Dental. Panthera Dental ha la facoltà di scegliere se sostituire o riparare il dispositivo.



Nota: Il design del dispositivo può variare a seconda delle specifiche richieste dal dentista.

Informazioni sull'assistenza agli utenti

Il numero di telefono del vostro dentista: _____

Per ulteriori informazioni, visitate www.panthersleep.com

Panthera Dental, Canada: 9105 rue John Simons, Québec, Canada, G2B 0S6

Panthera Dental, Francia: 38 Rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, Francia.

Panthera Dental, EE. UU.: 22343 La Palma Ave, Ste 128, Yorba Linda, CA, USA 92887.



Validità:

La pubblicazione di queste istruzioni per l'uso annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. L'autorizzazione e la disponibilità dei prodotti possono essere limitate a determinati paesi/regioni. © Panthera Dental, 2022. Tutti i diritti riservati.

Attacco dell'asta

Le aste collegano il bite superiore e quello inferiore (cerniera) e permettono di spostare la mandibola in avanti.

1. Attaccare un'asta su ogni lato del bite inferiore nell'incavo dell'ancoraggio, il punto di ancoraggio fisso andrà a unirsi all'incavo sull'asta.


2. Premere saldamente per bloccare. Il numero dell'asta deve essere rivolto verso l'interno e l'estremità non attaccata deve essere diretta verso la parte posteriore del bite.

Fissare prima il bite superiore e quello inferiore su un lato.



Prepararsi al sonno

- «Lavarsi i denti e passare il filo interdentale, quindi inumidire il dispositivo con acqua tiepida.
- «Quando si posiziona il dispositivo in bocca, mettere PRIMA il BITE SUPERIORE su tutti i denti superiori premendo su entrambi i lati con i polli.
- «Spostare la mandibola in avanti, premere il bite inferiore nella sua posizione sui denti inferiori. Premere su entrambi i lati con la dita.
- «Chiudere lentamente la bocca. In questa configurazione, la mandibola è in posizione avanzata.

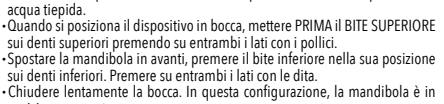

3. Per fissare il bite superiore, posizionarlo con il lato "dent" in vista (rivolto verso l'alto), fissare un lato del bite superiore al bite inferiore con l'asta inserita nell'incavo.

Rimozione di D-SAD Classic o X3

1. **Rimuovere il bite inferiore:** posizionare i polli su entrambi i lati del bite inferiore, vicino alla gengiva, e tirare verso il basso entrambi i lati del bite allo stesso tempo.

2. **Rimuovere il bite superiore:** posizionare le dita su entrambi i lati del bite superiore, vicino alla gengiva, e tirare verso il basso entrambi i lati del bite allo stesso tempo.

3. **Rimuovere il dispositivo dalla bocca e pulirlo** secondo le istruzioni per la pulizia.

Istruzioni per la pulizia e la conservazione

Ogni mattina, dopo ogni utilizzo, sciogliere il dispositivo con acqua tiepida e pulirlo con uno spazzolino da dente a setole morbide o per dentiere, spazzalando tutte le superfici e i lati.

• «Ispezionare il dispositivo per verificare la pulizia ed eventuali danni.

• «Asciugare bene il dispositivo con carta o un panno pulito.

• «Pulire il dispositivo almeno due volte a settimana con una soluzione detergente antibatterica per dentiere senza dolo. Seguire le istruzioni del produttore. Immergere e spazzolare il dispositivo con la soluzione. Risciacquare e asciugare bene con un panno a carta pulita.

• «Prima di riporre il dispositivo, assicurarci che la custodia sia pulita e asciutta.

• «Conservare il dispositivo nella custodia con il coperchio aperto, a temperatura ambiente lontano da calore diretto, umidità e luce. Non conservare mai il dispositivo in un contenitore chiuso quando è umido.

Avvertenze

- Non immergere il dispositivo in acqua bollente (100 °C o 212 °F).
- Verificate di non avere allergie agli ingredienti presenti nella soluzione antibatterica cloroxvina senza dolo per la pulizia della dentiera prima di usarla.
- Non usare culloriotio per pulire il dispositivo, perché potrebbe macchiare e trasferire odore o sapore.
- Non usare prodotti a base di cloro, candeggina, acido acetico, prodotti per la pulizia della casa o soluzioni a base di alcool.

Nota: Lo scolorimento del dispositivo può essere un evento normale, dovuto all'acidità della saliva. Alcune medicine, utrazioni in amalgama, caffè, tè, cola, vino possono influenzare il colore del dispositivo. Ciò non influenzerà le prestazioni o la garanzia.

Esercizi mattutini utili

Se avete difficoltà con i vostri denti al mattino:

- «Il dentista può fornire istruzioni sull'esercizio mattutino per aiutare a riorientare il morso dopo aver indossato il dispositivo, come spostare il mento all'indietro, stringere i molari insieme e mantenere la posizione per 2-3 secondi (ripetere 5-10 volte).

• «Fate colazione o masticate una gomma senza zucchero: aiuterà il vostro morso a tornare alla normalità.

Altri suggerimenti

- Bere solo acqua mentre il dispositivo è in posizione.
- Viaggi aerei: si consiglia di mettere il dispositivo nel bagaglio a mano.
- «Tenere lontano dagli animali domestici perché potrebbero pensare che sia un "giocattolo da masticare".


Composizione del materiale

Sia D-SAD Classic che D-SAD X3 sono realizzati al 100% in poliammide di tipo 12, un materiale per uso medico della famiglia del nylon. Le allergie e le intolleranze a questo materiale biocompatibile sono estremamente rare. In caso di dubbi, smettere di usare il dispositivo e consultare il proprio dentista o medico.

Garanzia

I dispositivi Panthera Sleep sono garantiti per 3 anni dalla data di produzione. La garanzia copre i dispositivi contro qualsiasi difetto di fabbricazione o dei materiali. Questa è una garanzia del produttore e qualsiasi riparazione deve essere fatta solo da Panthera Dental o dai suoi partner/distributori autorizzati. La garanzia non include eventuali costi associati a visite dentistiche o mediche aggiuntive.

Nota: Perché questa garanzia sia valida, il dispositivo e/o le aste e le clip devono essere restituite dal dentista a Panthera Dental. Panthera Dental ha la facoltà di scegliere se sostituire o riparare il dispositivo.

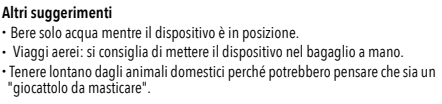

Informazioni sull'assistenza agli utenti

Il numero di telefono del vostro dentista: _____

Per ulteriori informazioni, visitate www.panthersleep.com


Panthera Dental, Canada: 9105 rue John Simons, Québec, Canada, G2B 0S6

Panthera Dental, Francia: 38 Rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, Francia.

Panthera Dental, EE. UU.: 22343 La Palma Ave, Ste 128, Yorba Linda, CA, USA 92887.

Validità:

La pubblicazione di queste istruzioni per l'uso annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. L'autorizzazione e la disponibilità dei prodotti possono essere limitate a determinati paesi/regioni. © Panthera Dental, 2022. Tutti i diritti riservati.

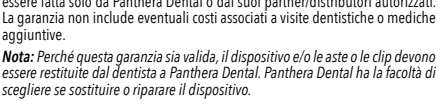


Attacco dell'asta

Le aste collegano il bite superiore e quello inferiore (cerniera) e permettono di spostare la mandibola in avanti.

1. Attaccare un'asta su ogni lato del bite inferiore nell'incavo dell'ancoraggio, il punto di ancoraggio fisso andrà a unirsi all'incavo sull'asta.

2. Premere saldamente per bloccare. Il numero dell'asta deve essere rivolto verso l'interno e l'estremità non attaccata deve essere diretta verso la parte posteriore del bite.

Fissare prima il bite superiore e quello inferiore su un lato.

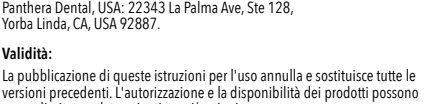

Attacco dell'asta

Le aste collegano il bite superiore e quello inferiore (cerniera) e permettono di spostare la mandibola in avanti.

1. Attaccare un'asta su ogni lato del bite inferiore nell'incavo dell'ancoraggio, il punto di ancoraggio fisso andrà a unirsi all'incavo sull'asta.

2. Premere saldamente per bloccare. Il numero dell'asta deve essere rivolto verso l'interno e l'estremità non attaccata deve essere diretta verso la parte posteriore del bite.

Fissare prima il bite superiore e quello inferiore su un lato.

